

ALPHA-STIM® M EN U

Voor chronische, acute en
post-operatieve
pijnbestrijding

Samen met de
behandeling van
angst, slapeloosheid
en depressies

ervaar het leven...OPNIEUW™



TM

TM


ALPHA-STIM®



Veteranen kiezen 3 van de 4 keer Alpha-Stim®

Oorlogsveteranen die ernstig pijn lijden, die de meeste mensen zich niet voor kunnen stellen, kiezen 3 van de 4 keer Alpha-Stim®. In een studie aan het Michael E. DeBakey Veterans Affairs Medical Center in Houston, Texas, werd Alpha-Stim® in 73% van de gevallen gekozen door veteranen die leden aan chronische pijn, nadat hen werd getoond hoe ze de opties voor de behandeling van hun pijn en stress konden gebruiken.¹

CAM apparatuur werd door 32 veteranen gekozen Over 197 Groepsbezoeken

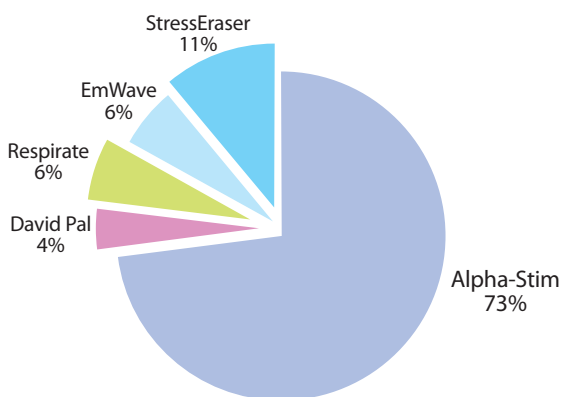

Waarom Veteranen de voorkeur gaven aan Alpha-Stim® voor Pijnbestrijding – Sneller, Veiliger, Effectiever

Alpha-Stim® maakt gebruik van microstroom elektrische therapie (MET) voor mensen die lijden aan acute, chronische of postoperatieve pijn en craniaal-elektrotherapie stimulatie (CES) bij angst, slapeloosheid en depressie. De golfvorm van de microstroom, die uniek is voor Alpha-Stim® technologie, produceert langdurige en cumulatieve resultaten, wat betekent dat de erlichtingblijvend is, waardoor u uw normale activiteiten kunt hervatten.

Alpha-Stim® is een uniek en effectief medisch toestel dat gebruik maakt van microstroom. Er is meer onderzoek dat Alpha-Stim® ondersteunt dan welk ander therapeutisch toestel in zijn klasse dan ook, en zelfs

1. Tan, Gabriel, Dao, Tam K., Smith, Donna L., Robinson, Andrew and Jensen, Mark P. Incorporating Complementary and Alternative Medicine (CAM) Therapies to Expand Psychological Services to Veterans Suffering From Chronic Pain. Psychologische Diensten. 7(3):148-161, 2010.

meer dan de meeste farmaceutica. Alpha-Stim®, dat in 1981 is ontwikkeld door Dr. Daniel L. Kirsch, heeft miljoenen mensen overal ter wereld voorzien van verlichting van chronische, acute en postoperatieve pijn, zelfs wanneer ander therapieën faalden. Gelukkig is dezelfde Alpha-Stim® die door militairen en veteranen wordt gebruikt nu ook beschikbaar voor u. Dus als u verlichting van uw pijn zoekt, vraag dan uw zorgverlener naar de mogelijkheden om Alpha-Stim® aan u voor te schrijven. Als u buiten de V.S. woont hebt u geen recept nodig.

Sneller

Alpha-Stim® behandelt uw pijn in slechts twee tot vijf minuten, door toepassing van sondes in een eenvoudige procedure, die gewoonlijk leidt tot een significante vermindering van de pijn. Zodra u de basisstrategie van de behandeling begrijpt, kan de eenvoudige 4-steps procedure op ieder deel van het lichaam worden toegepast.

Veiliger

Alpha-Stim® biedt therapeutische, duurzame resultaten, zonder risico op gevaarlijke bijwerkingen, tolerantie en verslaving, en kan ook gebruikt worden als toevoegsel aan medicatie. Alpha-Stim® stelt u in staat om na behandeling uw normale, dagelijkse activiteiten te hervatten en is geschikt voor klinisch of thuisgebruik.

Effectiever


Er is een enquête uitgevoerd onder 2.500 patiënten die craniaal-elektrotherapie stimulatie en MET gebruikten voor pijnbestrijding.² Negen van de 10 mensen meldden een significante vermindering met een verbetering van tenminste 25%, ongeacht de oorzaak van hun pijn. De resultaten worden weergegeven in de grafiek op de volgende pagina.

Wat is Alpha-Stim® en hoe werkt hij?

Alpha-Stim® is een klinisch bewezen elektromedisch toestel voor de verlichting van pijn, angst, depressie en de bevordering van de slaap, door het gebruik van microstroom technologie.

2. Kirsch, Daniel L. *The Science Behind Cranial Electrotherapy Stimulation* (2nd Ed), Medical Scope Publishing Corporation, Edmonton, Alberta, Canada, 2002.

Percentage patiënten dat significante verlichting rapporteerde

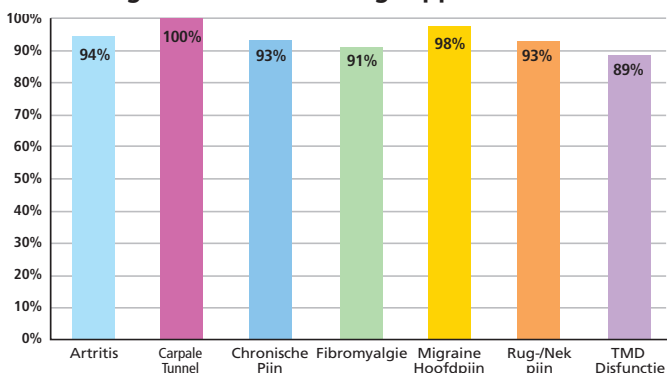

Alpha-Stim® genereert een unieke, exclusieve golfvorm die geen enkel ander toestel kan bieden. Net zoals niet iedere witte pil hetzelfde is, produceert de unieke golfvorm van Alpha-Stim® resultaten die enorm afwijken van die van zijn concurrenten. In tegenstelling tot medicijnen, die in chemische vorm worden ingebracht in uw lichaam en dan afgebroken worden in kleinere componenten, zoals elektronen, begint Alpha-Stim® op het niveau van het elektron, wat de cellen van uw lichaam in staat stelt om terug te keren naar hun natuurlijke toestand van functioneren. Alpha-Stim® biedt u snel langdurige, cumulatieve verlichting, wat u in staat stelt om uw normale dagelijkse activiteiten te hervatten.

Testimoniums

Jaren pijn in minuten weg...

"Ik heb de Alpha-Stim® op verschillende plaatsen gebruikt en ben dol op de manier waarop ik met één behandeling mijn eigen pijn kan laten afnemen of soms zelf volledig kan laten verdwijnen. Ik gebruik de Alpha-Stim® meestal met de oorklemmen wanneer ik spanning heb en de spieren in mijn nek en hoofd verstijven en de zenuwen in mijn hoofd lijken te exploderen, wat uiterst pijnlijk is. Ik sluit de Alpha-Stim® aan met de oorklemmen en de pijn en spanning verdwijnen."

– Peggyann Collins

"De Alpha-Stim® heeft mijn leven veranderd. Ik kan na tien jaar slopende pijn weer lopen, slapen en functioneren. Ik verrees uit een tien weken durend pijnbestrijdingsprogramma met verschillende technieken en hulpmiddelen om de kwaliteit van mijn leven te verbeteren en de Alpha-Stim® is het best van allemaal."

Gelijk na mijn eerste behandeling had ik al concrete resultaten. Mijn letsel loopt uiteen van traumatisch hersenletsel tot meerdere problemen met gewrichten en zachte weefsels. Ik voel me herboren en heb nu energie en hoop dat ik weer productief kan worden. Nu ik mijn eigen Alpha-Stim® heb, heb ik de kwaliteit van leven weer in eigen hand. Geen verdoving door voorgeschreven medicijnen meer en neerwaartse spiraal van bijwerkingen meer. I ben gezegend.”

–Justin Powers

“De pijn was onverdraaglijk. I kwam drie maanden lang amper uit bed. Ik begon de Alpha-Stim® drie keer per week en één uur per keer te gebruiken. Na twee weken nam de zwelling af. I ging voor het eerst in meer dan een jaar weer naar dansen. Nu ren ik drie kilometer per dag. Ik had het gevoel alsof er een wonder was gebeurd. Ik was ook boos dat mijn dokter niets wist over de Alpha-Stim®. Ik had het afgelopen jaar met heel wat minder pijn kunnen leven als hij op de hoogte was geweest van de technologie van Dr. Kirsch.”

– Nancy Eichhorn

“Mijn been (rechts) is boven de knie geamputeerd en ik heb een hoop fantoompijn. Ik heb ook heel wat last van stremmingen in mijn linkerbeen. Er zijn vele pogingen gedaan om het vrij te maken, maar dit bleef zonder succes. Ik leed dagelijks extreme pijn. Ik heb de afgelopen drie maanden de Alpha-Stim® gebruikt. Het gebruik hiervan geeft een hoop verlichting. Sommige dagen gebruik ik hem 2 of 3 keer en het kan voorkomen dat ik hem andere dagen helemaal niet gebruik. Ik vind behandelingen het best als ze gevolgd worden door hem aan mijn oren te gebruiken... zo ontspannend. Ik kan dan de pijn verdragen en ik ben dan veel beter gezelschap. Het leven van mijn vrouw is minder gespannen sinds mijn pijn is verminderd en ik ben in een beter humeur. In mei ben ik met het vliegtuig van de ene kant van het land naar de andere gevlogen. Ik werd erg ge-spannen en kon niet ontspannen. Tijdens de vlucht heb ik de Alpha-Stim® aan mijn oren gebruikt. Ik ontspande, viel en slaap en genoot van mijn reis. Ik zou iedereen het gebruik van de Alpha-Stim® willen aanbevelen. Hij heeft ertoe bijgedragen dat ik minder pijn heb en iedere dag van het leven geniet.”

– Alan J. Mand

Is Alpha-Stim® veilig?

Er zijn zowel meer dan 55 onderzoeken en gepubliceerde rapporten als lopende onderzoeken, enquêtes onder patiënten en professionele bevestigingen die allemaal de veiligheid en doeltreffendheid van Alpha-Stim® ondersteunen. In studies over een periode van meer dan dertig jaar, waarin ongeveer 8.800 mensen waren betrokken, zijn slechts kleine, zichzelf beperkende, bijwerkingen gerapporteerd, waarvan hoofdpijn (0,10%) en huidirritatie op de plaatsen van de elektrodes (0,07%) het meest voorkwamen. De Alpha-Stim® technologie is bijzonder effectief (bij juist gebruik) bij 9 van de 10 mensen die hem gebruiken. Afname van de pijn wordt gewoonlijk tijdens een enkele behandeling ervaren, maar kan uren na de behandeling of na een serie behandelingen worden ervaren.

Electromedical Products International, Inc. Een toegewijd bedrijf dat u kunt vertrouwen



Electromedical Products International, Inc. (EPI) is in 1981 opgericht door Dr. Daniel L. Kirsch, een wereldwijd vermaarde neurobioloog, die een veilige en effectieve oplossing ontwikkelde voor de behandeling van pijn, slaap- en gemoedsaandoeningen met behulp van


Alpha-Stim® technologie. In 2008 ontving hij de prestigieuze Richard S. Weiner Pain Educator of the Year Award van de American Academy of Pain Management. In 2009 ontving EPI een Best of Business Award in de categorie Chirurgische en Medische Instrumenten van de Small Business Commerce Association (SBCA). EPI en zijn personeel zijn toegewijd aan het nastreven van uitmuntendheid in de behandeling en diagnose van medische en aan gezondheidszorg gerelateerde kwesties. In 2011 won EPI de prestigieuze American Institute of Stress Award voor Onderscheid en Innovatie, gebaseerd op de toenemende lijst van publicaties in door collegiaal getoetste tijdschriften, die de doeltreffendheid en veiligheid van Alpha-Stim® producten aantoonde.




Vandaag de dag is EPI een wereldwijde onderneming met vertegenwoordigers overal ter wereld. EPI is een bij de FDA geregistreerd bedrijf, waarvan de activiteiten zijn gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij van de Internationale Standaards Organisatie (ISO) 13485:2003 standaards voor kwaliteit van medische apparatuur. De Alpha-Stim® producten verwierven en behouden het CE keurmerk door te voldoen aan de Europese Richtlijnen voor Medische Apparatuur.

Wat kunt u verwachten van behandelingen

Ook al is Alpha-Stim® technologie bij juist gebruik voor 9 van de 10 mensen uiterst effectief is, hij werkt niet voor iedereen. Als er na het uitproberen van verschillende plaatsen geen duidelijke verlichting van

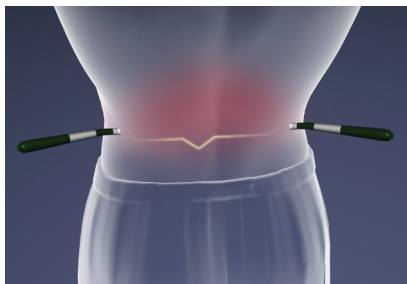

de pijn wordt bereikt, overweeg dan om de primaire plaats van de pijn gedurende 60 minuten of meer te behandelen met een lagere stroominstelling van 1 - 2 (100 tot 200 μ A) met de AS-Trode™ elektrodes. Indien noodzakelijk kan hij de hele dag worden gebruikt.

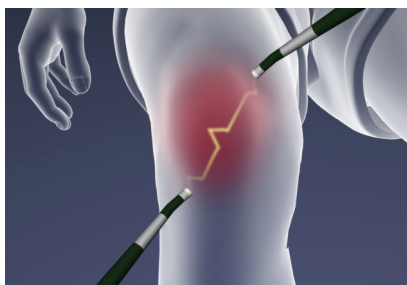

1,5 Hz kan bij sommige mensen betere resultaten opleveren als 0,5 Hz niet werkt, maar dit komt zelden voor. Het kan ook nodig zijn om alle plaatsen, waar dan ook op het lichaam, die pijn doen te behandelen om resultaten te behalen. Als de Alpha-Stim® niet goed werkt voor u, neem dan voor technische ondersteuning contact op met uw behandelende arts, uw lokale bevoegde Alpha-Stim® distributeur of EPI.

Er wordt gewoonlijk tijdens een enkele behandeling zowel beteugeling van de pijn als afname van angst ervaren,

maar het kan voorkomen dat dit uren na de behandeling wordt ervaren.

Slapeloosheid verbetert gewoonlijk na de initiële behandel-ling, maar het kan ook 3 weken duren.

Slapeloosheid wordt beteugeld door het ontspanningseffect.

Terwijl de meeste mensen hem kunnen gebruiken voor het slapen gaan en als ze 's nachts wakker worden, sommigen vinden dat ze hun 20 - 60 minuten Alpha-Stim® CES

behandeling tenminste 3 voor het naar bed gaan moeten uitvoeren, omdat de toegenomen waakzaamheid na een CES

behandeling hun slaap kan verstoren. Hij kan ook 's morgens worden gebruikt om 's nachts beter te kunnen slapen.



Met dagelijkse behandelingen duurt het gewoonlijk 3

weken of langer om significante verbeteringen te ervaren in geval van depressies, maar het kan nog langer duren.

Nadat de aandoening onder bedwang is, is het gewoonlijk voldoende om Alpha-Stim® 2 - 3 keer per week of minder te gebruiken, om goede resultaten te behouden.

Alpha-Stim® kan worden gebruikt als aanvulling op medicatie, psychotherapie of andere behandelingen. Het kan zijn dat op aanwijzing van een arts het gebruik van sommige medicijnen verminderd moet worden, omdat CES de uitwerking van de voorgeschreven medicijnen kan versterken. Tijdens het gebruik van CES dient de medicatie te worden bewaakt.

Alpha-Stim® producteigenschappen

Primaire indicaties

Pijn

Angst

Slapeloosheid

Depressie

Behandelmethodes

Slimme sondes (Smart Probes) voor Pijn

Elektrodes voor Pijn

Oorklemmen voor CES

Plus

Vijf (5) jaar garantie

Gratis toegang tot klinische en technische ondersteuning

Gewoonlijk worden er geen fysieke beperkingen opgelegd na een behandeling, dus de meeste gebruikers kunnen hun normale activiteiten gelijk hervatten. Sommige gebruikers kunnen een gelukkig gevoel of ontspanning ervaren die tot enkele uren na de behandeling tijdelijk hun mentale en/of fysieke vermogens voor het uitvoeren van potentieel gevaarlijke taken verminderen, zoals het besturen van een motorvoertuig of het bedienen van zware machinerie.

Er zijn geen significante blijvende bijwerkingen gerapporteerd. Er kunnen zich incidenteel hoofdpijn, ongemak, huidirritatie onder de elektrodes of duizeligheid voordoen. Als er zich een zwaar gevoel voordoet, vervolg dan de behandeling tot tenminste 2 minuten nadat het overgegaan is in een licht gevoel. Bij behandeling aan het hoofd kunnen sommige mensen flitsen zien als gevolg van stimulatie van de oogzenuw tijdens de behandeling. Sommigen kunnen een metaalachtige smaak van vullingen ervaren, die tot enige tijd na de behandeling kan duren. Dit zijn allemaal lichte, zichzelf beperkende reacties.

Alpha-Stim® M

Voor behandeling van meerdere pijnplaatsen en angst, slapeloosheid en depressies.

Alpha-Stim® AID

Voor behandeling angst, slapeloosheid en depressies zonder pijn.



Selecteer de Alpha-Stim® die het best is voor u

Alpha-Stim® technologie is beschikbaar in twee gemakkelijk te gebruiken therapeutische toestellen zowel voor klinisch als thuisgebruik. Zie bovenstaande tabel.

Alpha-Stim® M biedt zowel microstroom elektrische therapie (MET) als craniaal-elektrotherapie stimulatie (CES) die pijn, angst, slapeloosheid en depressies behandelt. Alpha-Stim® M is het meest complete en veelzijdige product en de enige keus voor diegenen die zowel pijn als angst, slapeloosheid en depressies willen behandelen. Alpha-Stim® M wordt compleet geleverd met sondes en zelfklevende AS-Trodes™ voor het behandelen van pijn en oorklemmen voor het toedienen van CES.



Alpha-Stim® AID biedt craniaal-elektrotherapie stimulatie (CES) voor diegenen die lijden aan angst, slapeloosheid en/of depressies zonder pijn.

Alpha-Stim® AID wordt complete geleverd met oorklemmen voor het toedienen van CES.



Hoe kan ik een Alpha-Stim® verkrijgen?

1. In de VS moet u eerst aan uw arts vragen of Alpha-Stim® goed is voor u en dient u een recept te verkrijgen.*

2. Ga naar www.alpha-stim.com of bel (800) FOR-PAIN in de VS en Canada om een Alpha-Stim® te bestellen of voor verwijzing naar uw lokale distributeur. Bel buiten de VS +940.328.0788. Of stuur een email naar info@epii.com.

5 Jaar beperkte garantie

Iedere Alpha-Stim® M wordt voor een periode van vijf jaar vanaf de aankoopdatum en bij normaal gebruik gegarandeerd op afwezigheid van defecten aan materialen en vakmanschap (batterijen en accessoires niet inbegrepen). Zie de gebruiksaanwijzing voor volledige informatie.

Alpha-Stim® M Technische specificaties

Elektrisch


Batterijen	2 AA 1,5 volt (bijgeleverd).
Timer	10 seconden Smart Probe wordt geactiveerd bij contact met de huid, 10, 20, 40 en 60 minuten terugtel timers voor automatisch uitschakelen en doorlopende timer voor verstreken tijd.
Stroom	0 tot 600 microampère (µA)
Frequentie	0,5, 1,5 of 100 Hz (pulsen per seconde) gecombineerd met een constante 0,4 Hz. De gemiddelde puls herhaalsnelheid is 0,8 Hz bij de meest gebruikte instelling van 0,5 Hz
Pulsbreedtes	Varieert tussen 0,25, 0,5, 0,75 en 1 seconde bij 0,5 Hz.

*Opmerking: Alpha-Stim® heeft in de grootste delen van de wereld vergunningen. In de Verenigde Staten is de vergunning afgegeven door de FDA voor marketing in alle staten of in opdracht van een bevoegde arts. Buiten de VS is hij zonder recept verkrijgbaar.

- Lading per puls

Bij 600 μ A en 0,5 Hz varieert de lading per puls tussen 150, 300, 450 en 600 microcoulomb (μ C). Iedere 10 seconden bedraagt de totale lading 1,5 milli coulomb (mC) in iedere richting.
- Golfvorm

Het impedantiebereik waarbinnen de golfvorm parameters geldig blijven loopt van 100 Ω tot 10 KO. De golfvorm is samengesteld uit bipolaire asymmetrische rechthoekige golven bij een werkcyclus van 50%, die zich periodiek herhaalt. Bij 0,5 Hz herhaalt hij zich in intervallen van 10 seconden. De golfvorm wordt gebalanceerd om een netto stroom van 0 in iedere richting te bereiken (zie grafiek).

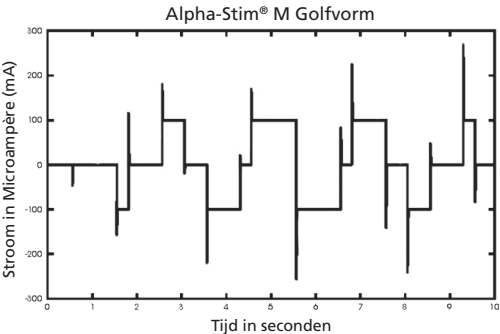

- Mechanisch

Hoogte11,0 cm

Breedte7,2 cm

Diepte2,1 cm zonder riemklem

Gewicht152 g met batterijen

Geproduceerd in China naar de veeleisende specificaties van EPI, VS.

De Alpha-Stim® M wordt compleet geleverd en is gereed voor gebruik met 1 set Oorklem elektrodes, 1 15 ml flacon Alpha Conducting Solution™ (flessen van 250 ml voor hervulling zijn beschikbaar), 2 sets loodkabel voor 4 elektrodes, 2 Smart Probes, 4 zilveren zelfklevende elektrodes van het merk AS-Trode™ voor meervoudig gebruik door één persoon (genoeg voor ongeveer 2 weken tot 1 maand gebruik) 100 Probe Electrode Pads (PEPSTM), 256 Earclip Electrode Pads (EEPS), geïllustreerde gebruiksaanwijzing, DVD met instructies, draagkoord, opbergtas en 2 AA batterijen. Dit is alles wat u nodig hebt om uw nieuwe Alpha-Stim® M in gebruik te nemen. Vervang de Alpha Conducting Solution™, de elektrodes van het merkAS-Trode™, PEP™ en EEP elektrodes uitsluitend door goedgekeurde Alpha-Stim® en AS-Trode™ producten.



Informatie voor het voorschrijven

EPI is ISO gecertificeerd

Electromedical Products International, Inc. is een bedrijf dat is gecertificeerd door de Internationale Standaards Organisatie (ISO). ISO is een Internationale organisatie die in samenwerking met ongeveer 140 landen en de Verenigde Naties standaards handhaaft voor alle toepassingen van technologie in alle takken van industrie ter wereld. Vereisten voor de bedrijfstak voor medisch apparaat zijn gerelateerd aan het ontwerp van bedieningsorganen, risicobeheer, milieubeheer, speciale processen (bijv. software validatie), opspoorbaarheid, behoud van vastgelegde gegevens en acties m.b.t. de regelgeving, zoals oplettendheid.

Elektromagnetische interferentie

Deze apparatuur is onafhankelijk getest door externe instanties en er is vastgesteld dat hij valt binnen de grenzen van het Internationaal Speciaal Comité voor Radiostoringen (CISPR). Deze grenzen zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een klinische of woonomgeving. Het is echter nog steeds mogelijk dat er zich in een bepaalde omgeving interferentie voordoet. Als er zich interferentie voordoet, vergroot dan de afstand tussen dit toestel en de apparatuur die wordt gestoord. Raadpleeg Electromedical Products International, Inc. als het probleem aanhoudt.

CE Nalegingsverklaring voor Europa

De Alpha-Stim® M is een medisch toestel van Klasse IIa, Type BF. Het is onafhankelijk getest door externe instanties om te kunnen verzekeren dat hij voldoet aan de van toepassing zijnde standaards voor medische apparatuur en elektromagnetische naleving.

Voorzorgsverklaring voor de Verenigde Staten

De Federale wetgeving (uitsluitend in de VS) stelt dat de verkoop van dit toestel uitsluitend plaats mag vinden door of in opdracht van een bevoegde arts. Buiten de VS is het wereldwijd beschikbaar zonder recept, maar wordt het aanbevolen om een bevoegde arts te raadplegen.

Indicaties

Alpha-Stim® M is een effectieve behandeling met brede toepassingsmogelijkheden voor een verscheidenheid aan syndromen die pijn inhouden. Zowel de M en Alpha-Stim® AID worden gebruikt voor het beheersen van angst, slapeloosheid en depressie of voor korte termijn verlichting van met deze indicaties geassocieerde symptomen. In veel gevallen is de Alpha-Stim® de enige vereiste therapeutische methode. Er zijn effectieve resultaten bereikt bij pijnbestrijding tijdens en/of na stimulatie van aangetaste lichaamsdelen, aangrenzende plaatsen en plaatsen die zich verder van de pijnlijke plaatsen bevinden. Net als met iedere therapeutische ingreep, zullen niet alle mensen reageren op Alpha-Stim®. De mate van doeltreffendheid varieert naar gelang de aard van het probleem dat wordt behandeld, de algemene gezondheidstoestand van de persoon en de behandelmethode. Het kan nodig zijn om wel een maand lang te proberen om een significante afname van de symptomen te kunnen waarnemen.

Contra-indicaties

Alpha-Stim® kan de werking van geïmplanteerde pacemakers van het demand type en geïmplanteerde defibrillators beïnvloeden. Stimuleer niet direct op de ogen en druk de sondes niet over de carotis-sinus (op de nek, vlakbij het strottenhoofd).

Voorzorgsmaatregelen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Laat kinderen het toestel niet gebruiken of behandelen zonder toezicht van een volwassene. Bedien geen potentieel gevaarlijke machinerie of voertuigen tijdens de behandeling en in sommige gevallen gedurende enkele uren na de behandeling, als de gebruiker zeer grondige ontspanning ervaart. Wees voorzichtig in gevallen waarbij ander vormen van analgesie (pijnbestrijding) niet gebruikt zullen worden; dit kan zijn om de pijn te behouden voor diagnose of in gevallen waarin mensen de plaatsen van pijnbestrijding zouden kunnen overbelasten. De veiligheid van stimulatie tijdens zwangerschap is niet vastgesteld. Er zijn berichten dat door CES de bloeddruk van patiënten met hoge bloeddruk werd verlaagd. Bij mensen die medicijnen voor de bloeddruk gebruiken dient de bloeddruk te worden bewaakt en de dosering van de medicijnen dient indien nodig door de voorschrijvende arts te worden verlaagd.

Schadelijke bijwerkingen

Schadelijke bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en beperken zichzelf. Uit gegevens van 144 gecontroleerde studies, open klinische testen en ongecontroleerde omstandigheden, waaraan 8.800 patiënten deelnamen, ten enquêtes door artsen, bleek dat de schadelijke bijwerkingen die redelijkerwijs geassocieerd konden worden met CES bestonden uit: duizeligheid (6 gevallen, 0,07%), huidirritatie/brandwonden door elektrodes (6 gevallen, 0,07%) en hoofdpijn (9 gevallen, 0,10%). Langdurige CES behandelingen bij hogere stromen dan noodzakelijk, kunnen duizeligheid of misselijkheid veroorzaken die uren of zelfs dagen kan aanhouden. Behandeling gelijk voor het slapen gaan kan leiden tot moeilijk in slaap komen als gevolg van verhoogde waakzaamheid. Er kunnen tegenstrijdige reacties, zoals overmatige opwindning, toegenomen onrust en verstoring van de slaap, voorkomen, maar die zijn zeldzaam.

Als Alpha-Stim® de pijn, angst, slapeloosheid of depressie niet binnen een maande begint te verminderen, raadpleeg dan uw behandelend arts, bevoegde Alpha-Stim® distributeur of EPI voor advies.



Geproduceerd en op de markt gebracht door:

Electromedical Products International, Inc.

2201 Garrett Morris Parkway/Mineral Wells, Texas 76067-9034 VS

Tel: 1 800 367 7246 in de VS en CANADA, of 940 328 0788

Fax: 940 328 0888 / E-mail: info@epii.com

EC REP

Bevoegde Vertegenwoordiger voor de Europese Unie:


MediMark Europe

11, rue Émile Zola – BP 2332/38033 Grenoble Cedex2– Frankrijk

Tel: +33 (0)4 76 86 43 22 / Fax: +33 (0)4 76 17 19 82

E-mail: medimark@easynet.fr

www.alpha-stim.com

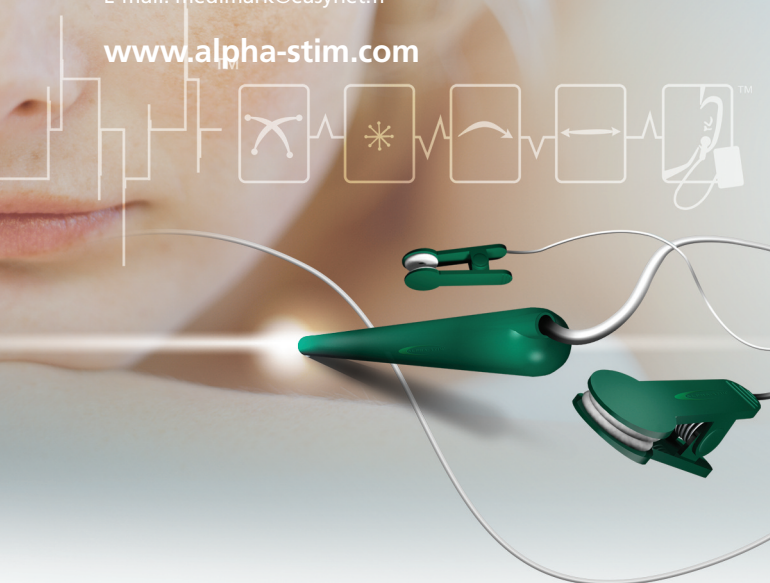

©Auteursrecht 2014 door Electromedical Products International, Inc.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Alpha-Stim® is a registered trademark. Manufactured under U.S. patents 8,612,008, 8,457,765, and 8,463,406.



Type B apparatuur.
Deze stimulator
wordt uitsluitend
intern van
stroom voorzien.



Zie de gebruik
saanwijzing. Lees
voor het gebruik de
gebruiksaanwijzing
grondig door.

REV A Dutch